

Taq Premix

02-100	100 反応
02-100-5	500 反応

製品説明

Taq Premix は、テンプレート DNA とプライマーと混ぜるだけで PCR に使用できるマスターミックス溶液であり、*Taq* DNA ポリメラーゼ、dNTP, Standard *Taq* 反応バッファー、安定剤が混合溶液として含まれている。DNA 溶液、細菌コロニーおよび cDNA 精製物などのルーチン PCR に最適である。

用途

- ・ PCR
- ・ プライマーエクステンション
- ・ コロニーPCR
- ・ ハイスループット PCR

PCR 反応液組成 (total 50μl)	
Taq Premix	25μl
Template	<500ng
Primer 1	0.2~1.0μM (final conc.)
Primer 2	0.2~1.0μM (final conc.)
滅菌蒸留水	up to 50μl

製品の性質

純 度 : SDS-PAGE (CBB 染色) で 95%以上が *Taq* DNA polymerase タンパク質。

エンドヌクレアーゼおよびエキソヌクレアーゼのコンタミネーションが検出されないことを確認している。

PCR 検定 : PCR 産物は、3' 末端に A をが 1 塩基付加される。したがって、その PCR 産物をそのまま T-vector にクローニングすることが可能である。また、末端平滑化およびリン酸化を行って、平滑末端のベクターにクローニングすることも可能である。

プレミックスの組成 : 10 mM Tris-HCl, 50 mM MgCl₂, 0.2 mM dNTPs, 5 % Glycerol, 0.08 % NP-40, 0.05 % Tween-20, 25 units/ml *Taq* DNA Polymerase, pH 8.6 @ 25°C

保 存 : - 20°C

M 1 2 3 4


図1 λ DNA増幅例

PCR条件

98° C 10sec
 57° C 30sec 25cycles
 72° C 8min.
 (2kbDNAの場合は2min.)

Lane M : marker

1 : 2 kbp
 2 : 4 kbp
 3 : 6 kbp
 4 : 8 kbp

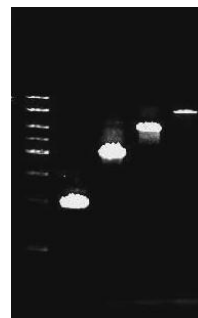

注 意 : Taq Premix は凍結融解の繰り返しにより活性が低下する恐れがある。融解後は PCR チューブに小分けして、-20°Cで保存すること。
 4°C保存の際は、3 ヶ月以内にご使用ください。